

4G GPS tracking Bracelet



Установка приложения для отслеживания

С помощью мобильного телефона опекуна отсканируйте расположенный ниже QR-код и установите приложение для отслеживания.



Установка SIM-карты и включение устройства

Откройте боковой слот для SIM-карты с помощью отвертки в принадлежностях.

Вставляйте SIM-карту в направлении, показанном на рисунке слева, пока SIM-карта не заблокируется.

Нажмите и удерживайте кнопку SOS, пока браслет не завибрирует с включенными индикаторами и мелодией звонка.



Вход в приложение

Войдите в приложение через 10-значный идентификационный номер устройства на задней этикетке и пароль по умолчанию 123456 от доступа к «Идентификатору устройства», как показано на скриншоте.



ID for App & Web login
Temperature Sensor*
BP&HR Sensor
Magnet
charging port



Отслеживание в реальном времени

На главной странице приложения отображается "Неподвижный" или "Движущийся" - браслет находится в сети. Только когда он подключен к сети, пользователь может выполнять настройки в приложении.

Щелкните значок отслеживания в реальном времени, чтобы проверить последнее местонахождение браслета. Щелкните значок в правом верхнем углу, чтобы установить интервалы загрузки местоположения. Обычно мы рекомендуем установить «12-часовой режим экономии заряда батареи», чтобы убедиться, что в браслете есть батарея для срочной экстренной помощи.



Настройки браслета

Когда на странице приложения отображается браслет онлайн. Щелкните значок «Настройки» и установите номера SOS, после чего сработают базовые вызовы браслетов и функция помощи SOS.

Установить основной номер мониторинга: Установите номер, используемый для отправки команд и получения SMS-предупреждений. Установите номера SOS: 3 номера SOS для приема вызовов SOS.



Настроить телефонную книгу

- Первые две цифры относятся к кнопкам браслета 1 и 2.
- Белый список: только номера из телефонной книги могут получать вызовы на браслет.

Голосовое сообщение

- Нажмите кнопку микрофона на браслете и говорите. Отпустите кнопку, чтобы отправить голосовое сообщение.
- Найдите «Голосовой разговор» в приложении, нажмите и послушайте голосовое сообщение от браслета.



Монитор здоровья

- Щелкните значок «Здоровье» и войдите на страницу управление здоровьем.
- Щелкните Сердце и перейдите на страницу измерения. Нажмите кнопку, как показано на рисунке, и нажмите OK для подтверждения. Браслет загрузит данные о частоте пульса и кровяном давлении в течение 3-5 минут.
- Сигнализация о таблетках и малоподвижном образе жизни: установите в соответствии с потребностями пользователя.




Прочие функции

• История маршрутов:

отображение истории маршрута любого дня за последние 90 дней. Вы можете выбрать, следует ли фильтровать данные о местоположении LBS.

(примечание: LBS означает данные о местоположении в помещении, точность плохая.)

• **Гео зона:** добавьте, отметьте или отмените геозону. Когда устройство попадает в GPS-забор или выходит из него. Приложение получит уведомление. (примечание: мы предлагаем радиус GPS-забора более 300 метров, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний.)

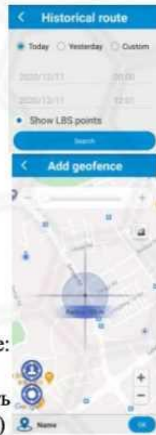


• **WIFI-забор:** вы можете установить 2 безопасные зоны WIFI, когда устройство покидает безопасные зоны WIFI, приложение будет выдавать уведомление.

Настройки: Другие функциональные настройки.

• **Об устройстве:** не забудьте указать контактный номер для пароля приложения, который будет использоваться в дальнейшем.

Фильтр LBS и WIFI: поскольку точность этих двух способов отслеживания хуже, пользователь может выбрать любой из них для повседневного использования. Если владелец браслета обычно остается в помещении, не рекомендуется выбирать любой из этих вариантов, если местоположение перестает обновляться. После редактирования информации щелкните значок «Сохранить».

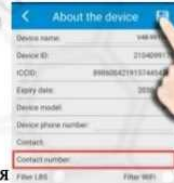

• **Переключатель SMS-оповещений:** включите этот параметр, чтобы часы могли отправлять SMS-оповещения на основной номер мониторинга или выключить его.

• **Тревога снятие браслета:** после включения более чем на 3 минуты часы будут отправлять оповещения, когда они снимаются с запястья.

• **Сюжетный режим:** установка сигналов при входящем звонке, напоминании о таблетках, будильник и т.д.

• **Будильник:** установите соответственно три различных режима будильника.

• **Найти устройство:** после отправки команды часы выдадут рингтон, чтобы помочь опекуну быстро найти часы и их владельца.

• **Язык устройства и часовой пояс:** установите язык и часовой пояс для SMS-оповещений часов. Варианты - китайский и английский.

• **Удаленная перезагрузка:** чтобы перезагрузить часы удаленно из этого параметра.

• **Удаленное отключение питания:** для удаленного отключения часов. (После этой настройки часы можно будет включить только вручную. Используйте с осторожностью)

• **Factory-Reset:** возврат устройства к заводским настройкам по умолчанию.

• **Список сигналов тревоги:** для проверки всех сигналов, сгенерированных браслетом. Нажмите и удерживайте, чтобы удалить сигналы тревоги.

• **Часто задаваемые вопросы:** вы можете найти решение для простых проблем.

Основные особенности:

- 4G LTE + 3G WCDMA + 2G GSM
- Способы отслеживания GPS + Beidou + WIFI
- Определение частоты пульса, артериального давления и температуры.
- Напоминание о таблетках, подсчет шагов и управление здоровьем
- Уровень водонепроницаемости: IPX7.
- Веб-платформа / мобильное приложение / SMS-команды для определения местоположения
- Кнопка SOS для помощи
- Один щелчок для быстрого звонка
- Говорящие часы
- Сигнал низкого заряда батареи
- Звонок для поиска браслета

Аксессуары:

- 1x GPS-браслет
- 1x USB-кабель для зарядки
- 1x отвертка
- 1x руководство пользователя
- 2 запасных винта
- 1x выталкиватель sim-карты

Спецификация продукта:

- 4G FDD: диапазон 1/2/3/5/7/8/20
- 4G TDD: диапазон 38/39/40/41
- 3G WCDMA: диапазон 1/2/5/8
- 2 г GSM: диапазон 2/3/5/8
- Точность GPS: 5-15 м (открытое небо)
- Точность WIFI: 15-100 м (под покрытием Wi-Fi)
- Рабочая температура: -20°C ~ + 70°C
- Рабочая влажность: 5% ~ 95%
- Размер хоста: 65x42x20 мм
- Вес нетто устройства: 73 г
- Емкость аккумулятора: 1000 мА

Приложение 1:

Важно! Пожалуйста, прочтите нижеприведенные заявления:

1. Из-за внешних факторов все устройства GPS имеют ошибку местоположения, поэтому местоположение предоставляется этим устройством только для справки.
2. При определенных обстоятельствах могут быть задержки по вине операторов связи. Наша компания не несет ответственности за убытки, причиненные этой задержкой.
3. WiFi в этом браслете не поддерживает 5G WiFi, убедитесь что передающие устройства настроены на 2.4G WiFi.

Приложение 2:

Инструкция индикаторов

| | Цвет | Статус | Значение |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Включено | Красный (сеть) | Медленно мигает | Поиск сигнала |
| | | Быстро мигает | Сигнал получен |
| | Синий (GPS) | Медленно мигает | Позиционирование |
| | | Быстро мигает | Позиция загружена |
| Зарядка | Красный индикатор | Медленно мигает | Заряжается |
| | | Всегда горит | Полностью заряжен |
| | Синий индикатор | Медленно мигает | Заряжается |
| | | Медленно мигает | Полностью заряжен |
| Низкий заряд батареи: только красный индикатор медленно мигает | | | |